



电动移液管助吸器

VITLAB pipeo®

- 轻盈手感，操作自如
- 安全设计，信赖之选
- 适配广泛，精准助吸

轻盈手感，操作自如

- 重心位置贴合掌心，
手感更舒适

采用“轻感”设计，仅重198克
重心位置完全贴合掌心，提供
超乎寻常的舒适手感，让每一
次操作都轻松自如。



- 双模式一键切换
兼顾操作精度和效率

重力模式适合高精度移液管，马达模式
加速排液，精准与速度，一键切换，满
足不同实验场景需求。

安全设计，信赖之选

- 内置单向阀
无惧倒吸

适配器内置单向阀，在重力和浮力的加持下缓解意外倒吸的风险。



- 模块化设计，维护便捷简单

适配器、滤器可轻松拆卸、清洁，耐受121 °C高温高压灭菌。



- 充电指示功能，状态随时掌握

满电状态可连续使用8小时，配备LED充电指示灯，红灯亮起表示电量还剩2小时，需及时充电，支持边充电边使用。

适配广泛，精准助吸


- 塔形适配器，移液管兼容度高

轻松适配 (0.1 - 200) ml,
玻璃和塑料移液管
无需额外配件辅助。



- 液体快速移取，提高实验效率

简约高效的移液，10 ml液体移取仅需2.3 s

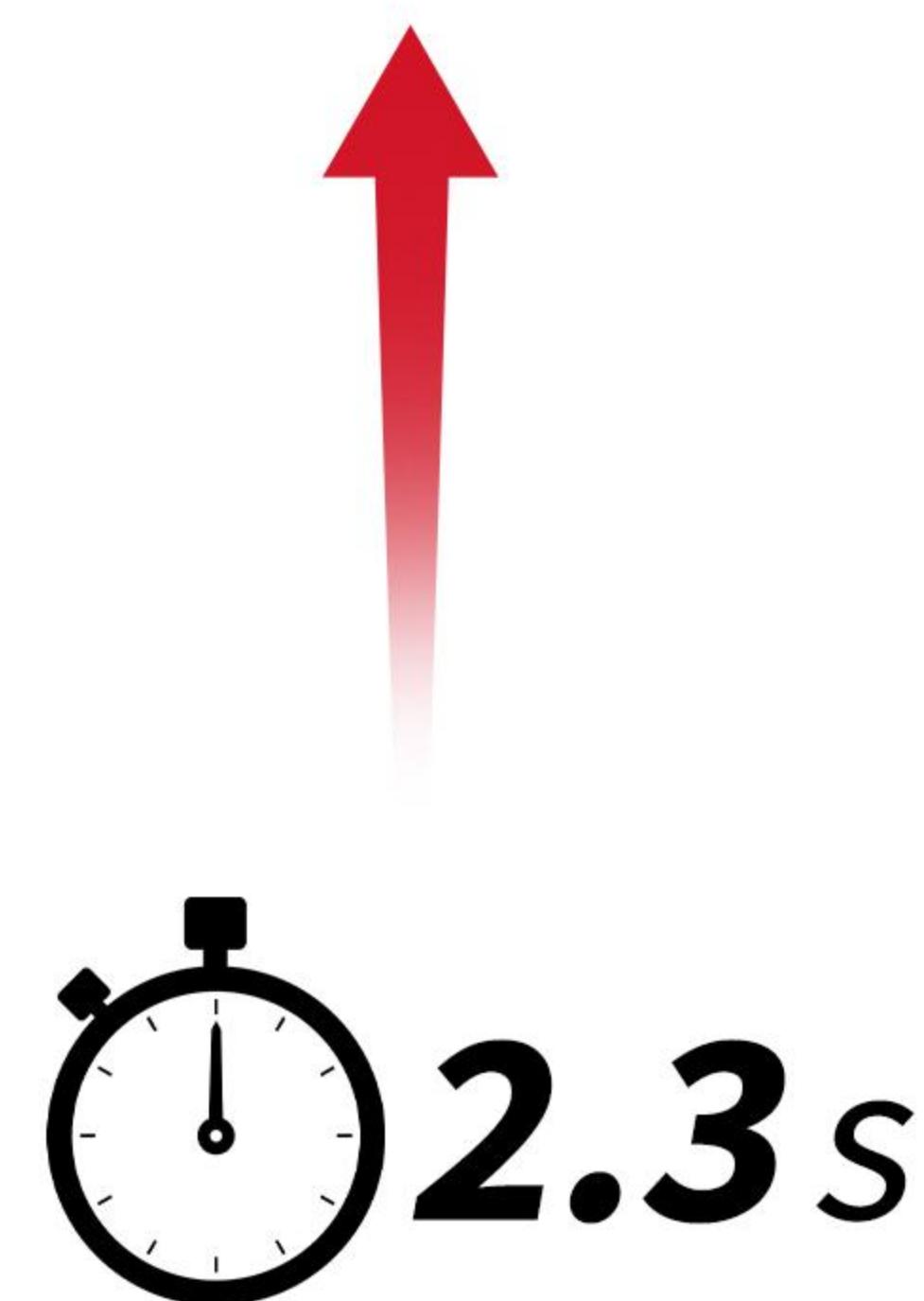

- 轻松控制流速，精准把控弯液面

通过吸排液按键的按压深度调节移液速度，
便于设置液体弯液面的位置。



订购信息

| 产品描述 | 货号 |
|------------|----------|
| Pipeo电动助吸器 | C0026380 |



产品配件



* 带单向阀的硅胶适配器



* 适配器外壳

| 产品描述 | 货号 |
|---------------------------|---------------|
| 带单向阀的硅胶适配器 | 26508 |
| 备用0.2μm无菌滤器(红色色标)1个, 泡罩包装 | 26530 |
| 备用0.2μm非无菌滤器10个, PTFE | 26535 |
| 备用3μm非无菌膜滤器10个, PTFE | 26056 |
| 镍氢电池 | 26630 |
| 适配器外壳 | VT003.1661281 |
| 电池充电器 | VT003.1671831 |



更多资讯

请关注我们的官方微信号：普兰德BRAND实验室

普兰德（上海）贸易有限公司

地址：上海市徐汇区凯滨路199号201-1室

电话：400 658 3016

普兰德公司网址：china.brand.com.cn

电子邮件地址：info@brand.com.cn

生产商：普兰德（湖州）科学仪器有限公司

生产地址：浙江省湖州市南浔区东迁街道东马南路1000号4号楼1楼

VITLAB和VITLAB图形标志是德国VITLAB GmbH的注册商标。其他商标为各自拥有者的财产。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然，许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果，在实际应用时可能由于各种的因素而超出我们的控制范围。因此.请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的责任。使用者有责任确定产品是否符合所进行的特定应用。涉及技术信息修改恕不另行通知。
可能包含错误。